





Bardex™ I.C. und Lubri-Sil™ I.C. Urinkatheter mit Bard® Hydrogel- und Bactiguard®-Edelmetall- (NMA) Beschichtung

Die Bardex™ I.C. und Lubri-Sil™ I.C. Urinkatheter wurden für eine möglichst schonende und sichere Dauer-Harnableitung entwickelt. Durch ihre spezielle Oberflächenveredelung kombinieren sie die Vorteile eines **hydrophil beschichteten Urinkatheters** mit den Eigenschaften eines **antimikrobiell beschichteten Katheters**.


Die Beschichtungstechnologien unterstützen eine **schmerzarme Katheterisierung** und bieten einen besonders hohen **Anwendungskomfort** für Patienten in Klinik, Pflegeeinrichtung und häuslicher Versorgung.

Die Katheter sind indiziert für die transurethrale Katheterisierung genauso wie für die suprapubische Ableitung oder als Kathetereinlage bei Nephrostomie.

Die bewährte **Bard® Hydrogel**-Technologie sorgt für eine hydrophile Oberfläche und macht den Katheter gleitbeschichtet, lubriziert und besonders gleitfähig. Als Katheter mit Gleitbeschichtung ermöglicht er ein leichtes Einführen und Entfernen und unterstützt eine schonende Katheterisierung. Der reibungsarme Katheter trägt dazu bei, die Belastung der empfindlichen Harnröhrenschleimhaut zu minimieren. Dadurch kann das Risiko von Reibungsschäden und Mikroverletzungen reduziert werden.

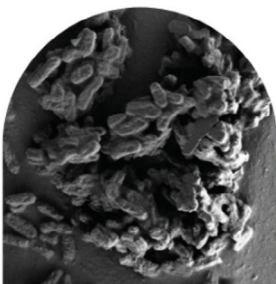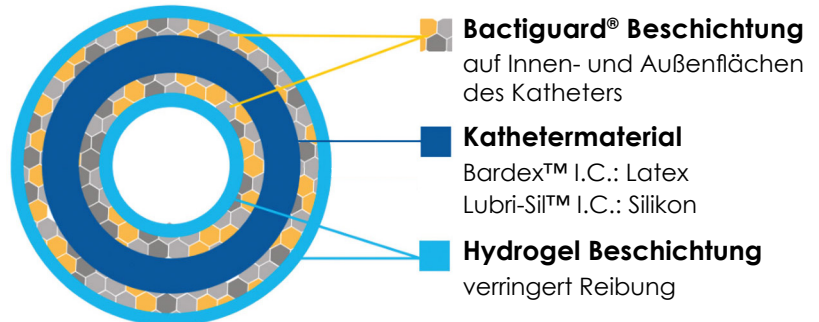

E. coli Besiedlung
auf unbeschichteter
Oberfläche

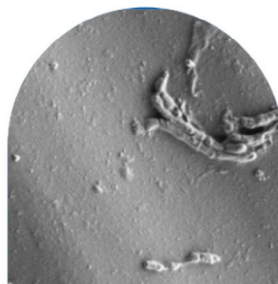

E. coli Besiedlung
auf Bactiguard®-
beschichteter
Oberfläche

Die bereits seit mehr als 15 Jahren etablierte **Bactiguard® Edelmetall- (NMA) Beschichtung** besteht innen- wie außenseitig aus einer Kombination von Gold, Silber und Palladium. Diese antiinfektive Beschichtung wurde entwickelt, um die mikrobielle Anhaftung auf der Katheteroberfläche zu erschweren (den Biofilm zu reduzieren).





Bactiguard®-beschichtete Katheter wurden umfassend gegen unbeschichtete Katheter getestet. Klinische und ökonomische Vorteile bei Verwendung von Bactiguard®-beschichteten Kathetern sind nachgewiesen – ein Studienblatt lassen wir Ihnen auf Anfrage gerne zukommen. Hier 3 wichtige Fakten - #Advantage Bactiguard®:

1

Weniger Katheter- assoziierte Harnwegs- infektionen CAUTI

In wenigstens 7 großen klinischen Studien mit über 30.000 Patienten wurde statistisch wie klinisch signifikant bei Verwendung von Bactiguard® Edelmetall-beschichteten Urinkathetern zwischen 31% und 90% weniger Katheter-assoziierte Harnwegsinfektionen CAUTI nachgewiesen. Bereits meßbar nach wenigen Tagen, nimmt die Relevanz in der 2. Woche der Kathetereinlage zu und bleibt für mindestens 35 Tage (Ende der Beobachtungszeiträume) erhalten.

2

Weniger Antibiotika, keine zusätzlichen Multiresistenzen

Ableitbar von der deutlichen Reduktion an CAUTI bei der Verwendung von Bactiguard®-beschichteten Kathetern liegt ein geringerer Bedarf an antibiotischen Therapien auf der Hand. Er wurde ebenfalls in einer Studie mit 853 Patienten mit -65% Antibiotikakosten belegt. Die Katheter können ohne Rücksicht auf bestimmte Urinkeime eingesetzt werden und führen nicht zu einer vermehrten Resistenz- / Multiresistenzbildung.

3

Günstiger Effekt auf die Sekundär- kosten für Patient und System

Den im Verhältnis zu unbeschichteten Kathetern höheren Preisen für Bactiguard®-beschichtete Katheter stehen deutliche Einsparungen für das Gesundheitswesen gegenüber:

- weniger Katheterwechsel
- mögliche längere Katheterliegezeiten
- weniger Hausbesuche aufgrund vermuteter Infektionen
- weniger und kürzere Krankenhausaufenthalte
- geringere Medikamentenkosten
- weniger Komplikationen durch weniger CAUTI's

Zwei Krankenhausstudien beziffern die Kostenreduktion durch die Verwendung Bactiguard®-beschichteter Katheter auf bis zu 35,5% (mehrere 100tsd EUR/Jahr).

Bezugsinformationen:

Bactiguard®-beschichtete Katheter sind in Deutschland als beschichtete Latexkatheter (Bardex™ I.C.) und als Vollsilkonkatheter (Lubri-Sil™ I.C.) erhältlich. Sie können über den pharmazeutischen Großhandel / die Apotheken oder direkt bei AUROSAN bezogen werden (als Sprechstundenbedarf wo erlaubt, als Direktbezug oder über Privatrezept).

Bardex™ I.C. – 2-lumige Foleykatheter, Latexkern, innen wie außen beschichtet mit Bard® Hydrogel und Bactiguard® Edelmetall. Ballongröße 5ml, L40cm, Nel, 12-24 CH.

Lubri-Sil™ I.C. – 2- oder 3-lumige Vollsilkonkatheter, innen wie außen beschichtet mit Bard® Hydrogel und Bactiguard® Edelmetall. Ballongrößen 5/30ml, L40cm, Nel, 12-24 CH.



Webshop Katheter
www.aurosan-shop.de/urin-katheter



AUROSAN fastOrder
www.aurosan.de/fastorder



Übersichtskarte Bactiguard®
www.aurosan.de/Taschenkarte



Factsheet Gleitgele
www.aurosan.de/factsheet-gleitgele



Kontakt
Webshop